

**FERRING**

PHARMACEUTICALS

**Gonapeptyl<sup>®</sup>**

Triptorelina

**DEPOT**

1




Retirar la cubierta de la jeringa-prellenada que contiene las microcápsulas (B)

2




Abrir el paquete con el conector, cubriendo su esterilidad con su mismo empaque

3

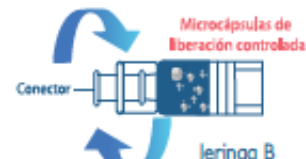

Enrosca la jeringa con microcápsulas (B), en el conector firmemente

4

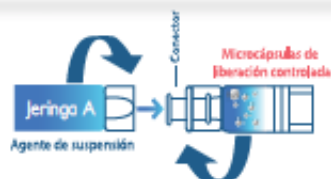


Una la jeringa que contiene el agente de suspensión(A) ajustadamente en el extremo libre del conector y confirme que esté seguro

5




Conecte las 2 jeringas. **INMEDIATAMENTE REALICE LA RECONSTITUCION**

6

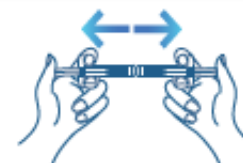


Intercale la suspensión reiteradamente, vacíe el líquido dentro de la otra jeringa hasta obtener una suspensión homogénea / lechosa

7

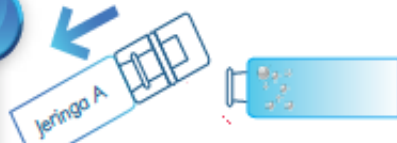

Retire el conector junto con la jeringa vacía

8

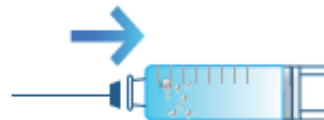

Coloque la aguja de inyección en la jeringa con la suspensión lista para aplicar

9



inyecte inmediatamente de forma subcutánea o intramuscular

**FERRING**

PHARMACEUTICALS

**Gonapeptyl<sup>®</sup>**  
Triptorelina **DEPOT**

Contenedor  
con conector

Jeringa A  
con agente  
de suspensión



**Gonapeptyl<sup>®</sup>**  
Triptorelina **DEPOT**



Jeringa B  
Prellenada con  
microcápsulas



Aguja

